


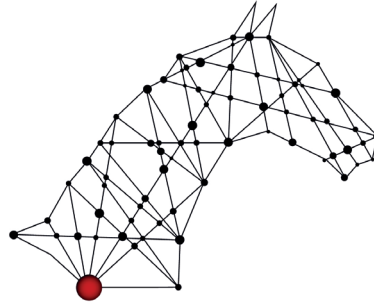

ARIONE
HORSE DATA SCIENCE

INSTALLATION GUIDELINES

NOTICE D'INSTALLATION

Harness System

Système Harnais

EN ENGLISH

Harness System 1

How to install EQUIMETRE? 1

How to take the EQUIMETRE off? 4

How to synchronise your data? 5

FR FRANÇAIS

Système Harnais 6

Comment installer EQUIMETRE ? 6

Comment enlever EQUIMETRE ? 9


Comment synchroniser vos données ? 10

EN HARNESS SYSTEM

How to install EQUIMETRE?

The installation of your EQUIMETRE begins before you start saddling.

1 WET THE 2 ELECTRODES

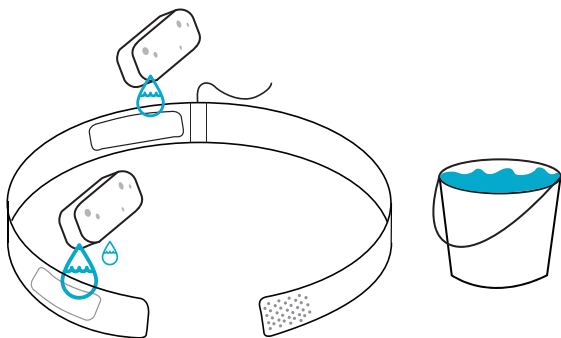


Warning : Do not drown the wire.

Wet both foams.


The surcingle should never be used without the foams.

3 TURN ON YOUR MONITOR

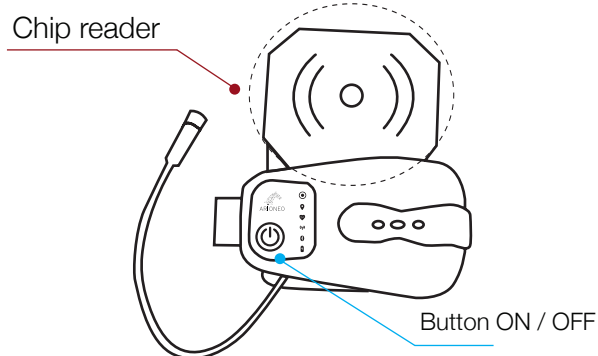


Turn on the EQUIMETRE by pressing the button once. The first white LED should blink.

2 INSTALL THE SURCINGLE

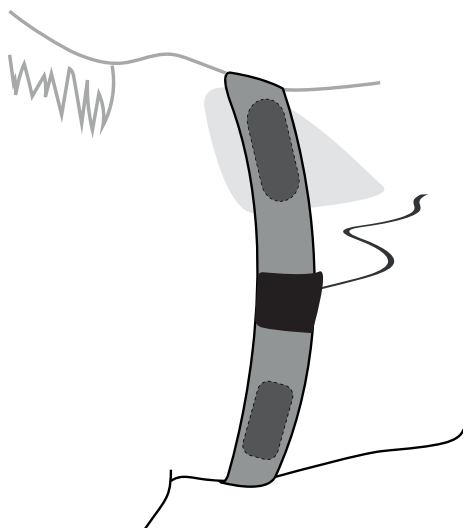

Install the surcingle so that the **upper electrode is placed in the withers hollow, on the left**, in direct contact with the horse's skin.

4 LOOK FOR THE HORSE'S VETERINARY CHIP

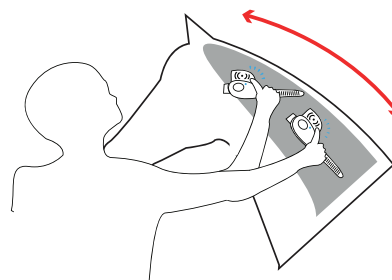


Look for your horse's veterinary chip by scanning the neck from withers to ears along the mane **SLOWLY**, until you hear a bip.

OR


Press the button 3 times to launch a training manually. You'll have to assign the horse's identity at the end of the training.

A bip sound indicates the start of the training. The first white LED should stop blinking.


5 INSTALL THE SENSOR IN THE SURCINGLE POCKET

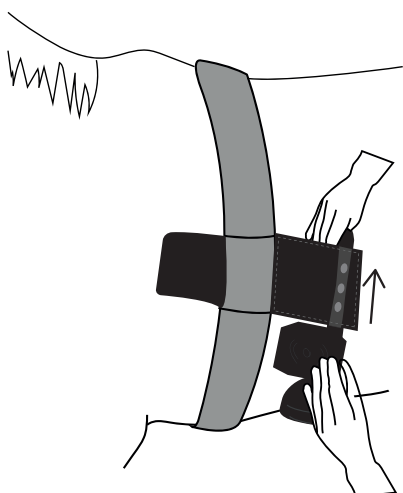

Insert the chip reader into the big hole of the surcingle pocket using both hands.


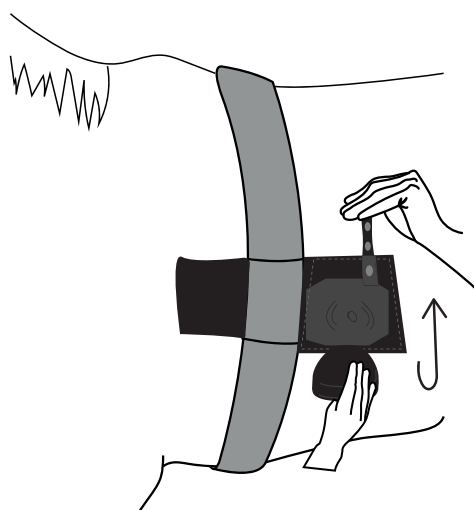


Get the strap through the small hole.

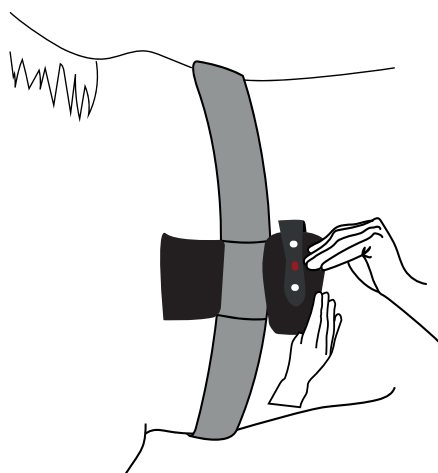


Secure the sensor by fastening the strap. The sensor is outside the pocket, and the chip reader is inside.

6 CONNECT THE SURCINGLE AND SENSOR WIRES

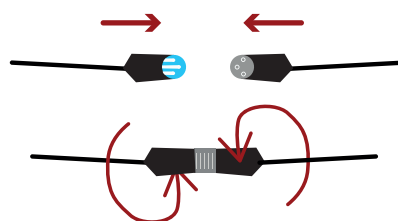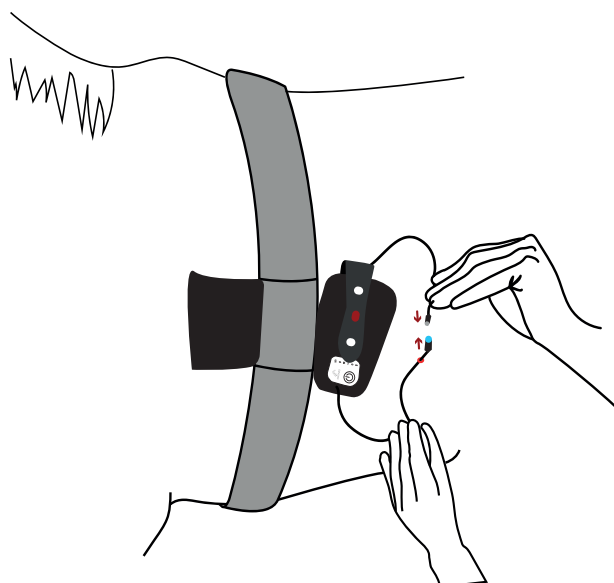


Connect the two wires by aligning the 3 pins, and screw in opposite directions.

7 PUT THE HARNESS ABOVE THE SURCINGLE

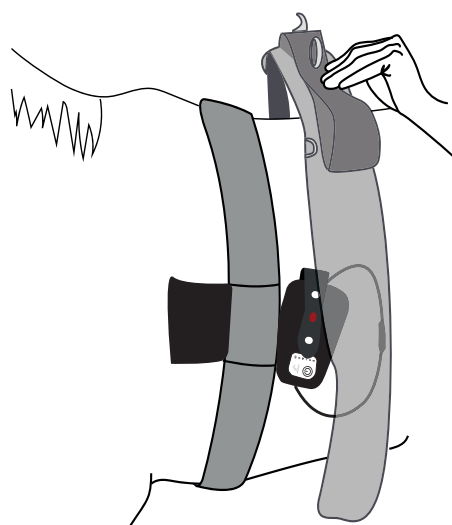


Install the harness on your horse as you usually do.

8 ATTACH THE VELCRO TO THE HARNESS

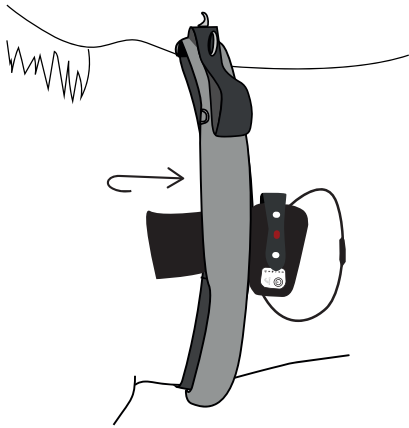

Open the pocket and attach the velcro back to secure the surcingle around the harness.

9 INSTALL YOUR SULKY

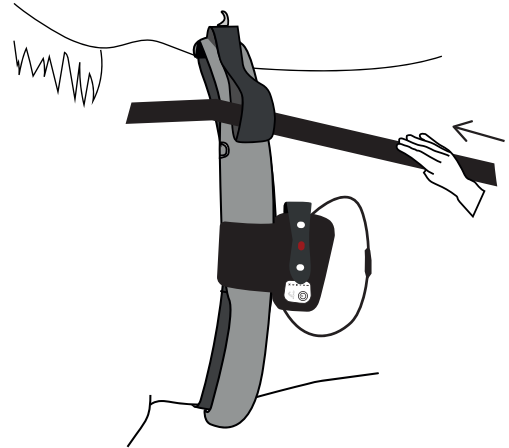

You can then install your sulky as you usually do.

10 CHECK IF YOU'RE READY TO GO



The first white LED must be turned on and white.




The second green LED shows GPS and flashes until a signal is detected. When you are inside, it may flicker; when you are outdoors, it will stabilize.



The third red LED shows the heart rate. Once installed, the sensor should blink at your horse's heart rate.

11 YOU'RE GOOD TO GO IF

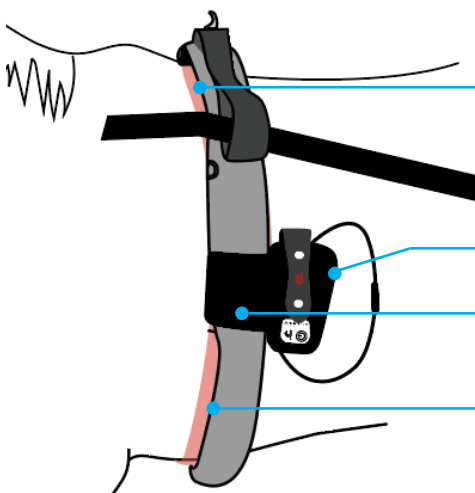

The surcingle is installed under the harness, against the horse's skin.

The sensor is in the surcingle pocket and the cables are connected.


The velcro is attached around the harness.

The surcingle is tightened to ensure good conductivity of the heart signal.

How to take the EQUIMETRE off?


At the end of your training, it is important to remove your EQUIMETRE by following the instructions below.

1 TURN THE EQUIMETRE OFF

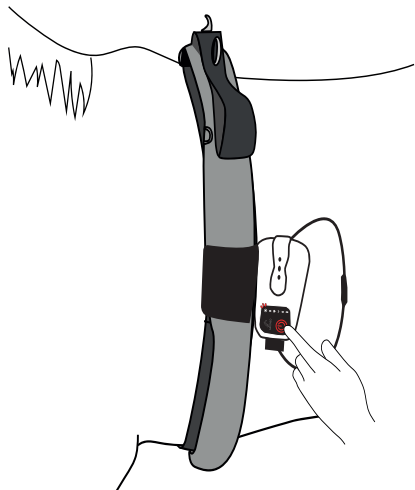


Turn the EQUIMETRE off by pressing the button during 3 secondes. All LEDs should turn off.

2 TAKE THE HARNESS OFF

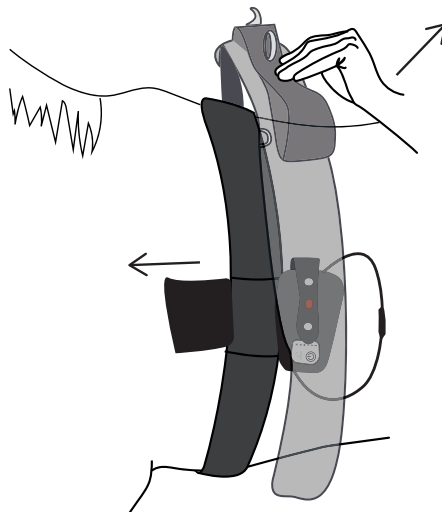


Open the velcro and take the harness off.

3 TAKE THE SURCINGLE OFF

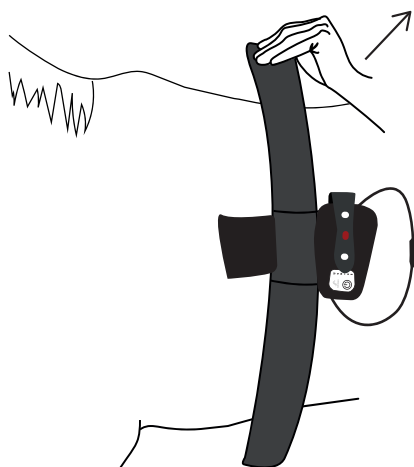


Take the surcingle off your horse, but you can let the EQUIMETRE in the pocket.

4 HANG THE SURCINGLE BEFORE THE NEXT USE

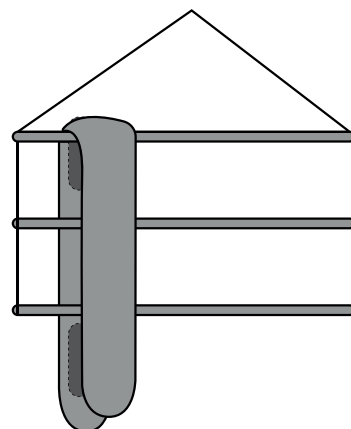

Warning: Hang your surcingle to prevent the cables inside from breaking, and to allow it to dry properly.

5 CHARGE THE EQUIMETRE

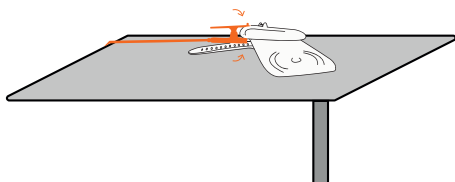

Warning : When not in use, be sure to always plug EQUIMETRE and check if the sensor is turned off. The charging orange LED should be on.


How to synchronise your data?

At the end of your training, access your data with your phone.

1 LOG IN TO THE EQUIMETRE APP




TURNED-OFF & NEARBY

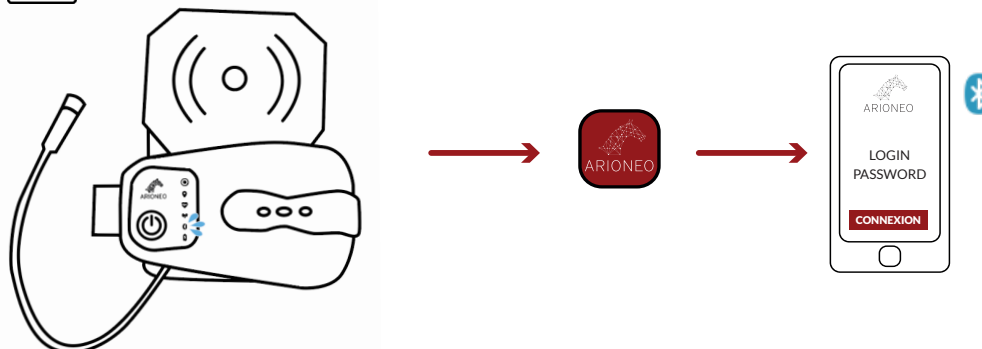

2 CLICK ON THE «SYNCHRONISE» BUTTON




TURNED-OFF & NEARBY

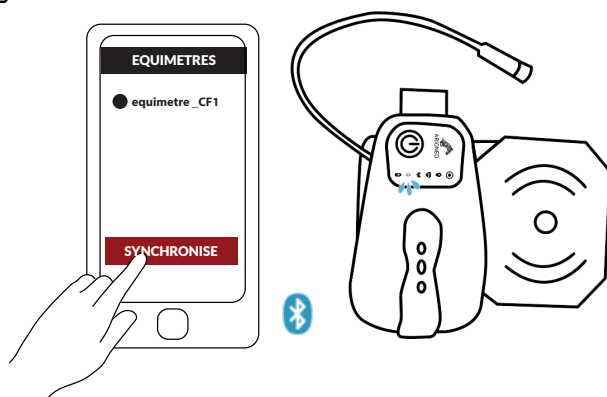

The download gauge reaches 100%.
EQUIMETRE must be turned off.

Your phone must be close to the sensor. The
bluetooth LED should start blinking.

3 IN THE «TRAINING» TAB YOU WILL FIND THE LIST OF DOWNLOADED TRAINING SESSIONS

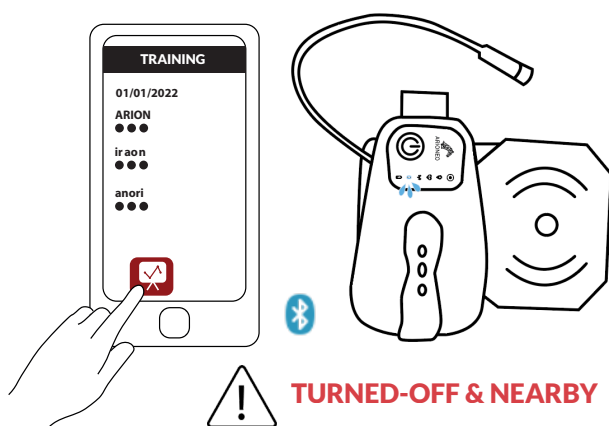

TURNED-OFF & NEARBY


Trainings are automatically uploaded to the Cloud so
you can find them from any device on Equimetre.com.

Click on the training to view it directly from the app.

Comment installer EQUIMETRE ?

L'installation de votre EQUIMETRE débute avant que vous ayez commencé à seller.


1 HUMIDIFIEZ LES 2 ÉLECTRODES

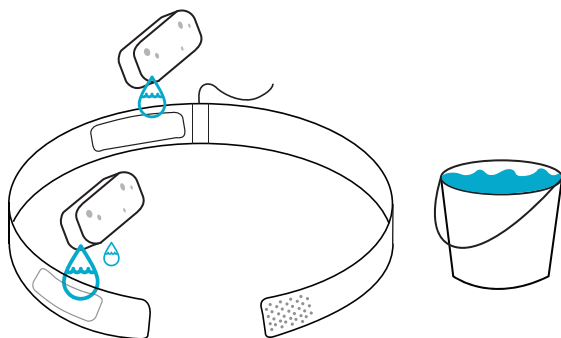

Attention : Ne pas immerger le câble et ne pas retirer les mousses.


Humidifiez la mousse des deux électrodes.
Ne jamais utiliser la sangle sans les mousses.

3 ALLUMEZ EQUIMETRE

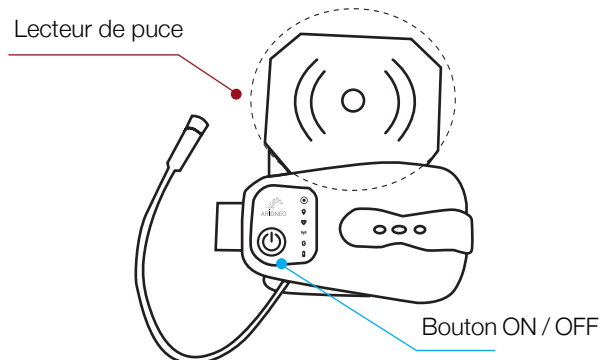


Allumez le capteur EQUIMETRE en appuyant 1 fois sur le bouton. La première LED blanche clignote.

2 INSTALLEZ LA SANGLE

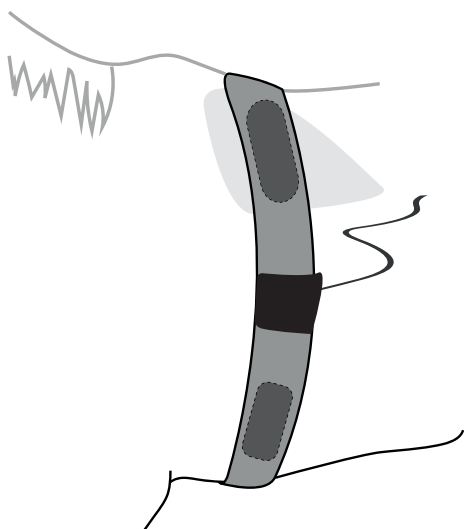

Installez la sangle de manière à placer l'électrode du haut dans le **creux du garrot à gauche**, en contact direct avec la peau du cheval.

4 CHERCHEZ LA PUCE VÉTÉRINAIRE DU CHEVAL

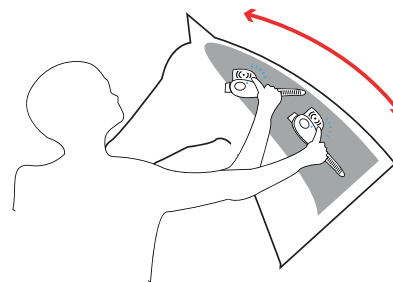


Cherchez la puce vétérinaire du cheval en scannant l'encolure avec le lecteur de puce. Allez du garrot aux oreilles **DOUCEMENT** jusqu'à entendre un bip sonore.

OU


Appuyez 3 fois sur le bouton pour démarrer un entraînement manuellement. L'identité du cheval pourra ensuite être assignée à la fin de l'entraînement.

Un bip sonore indique que l'entraînement a commencé. La LED blanche se fixe.


5 INSTALLEZ LE CAPTEUR DANS LA POCHÉ DE LA SANGLE

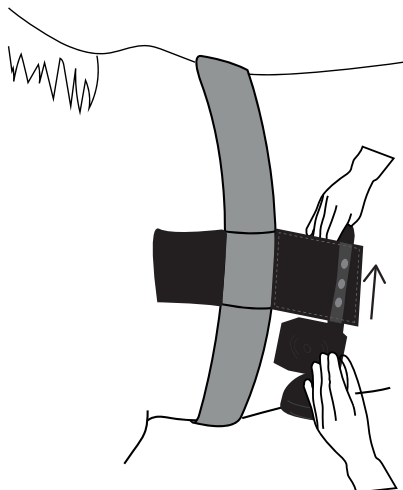

Glissez le lecteur de puce vétérinaire dans la grande ouverture de la sangle.


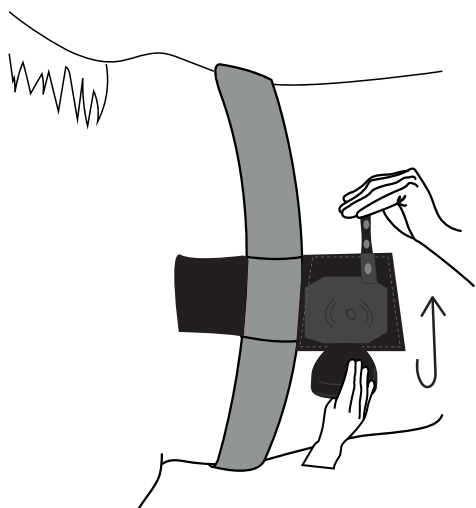


Attrapez l'attache par la petite ouverture de la sangle.

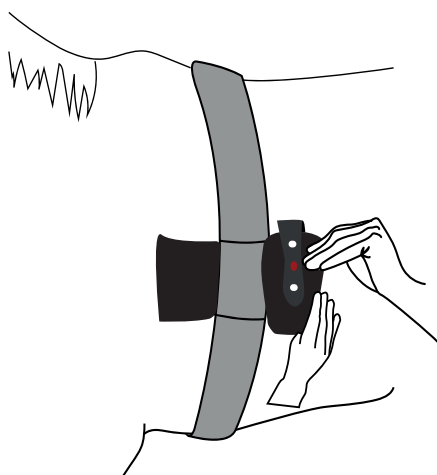


Sécurisez le capteur en attachant le passant. Le boîtier doit se situer à l'extérieur de la poche, et le lecteur de puce à l'intérieur.

6 CONNECTEZ LES CÂBLES DE LA SANGLE ET DU CAPTEUR

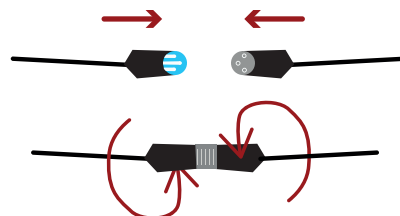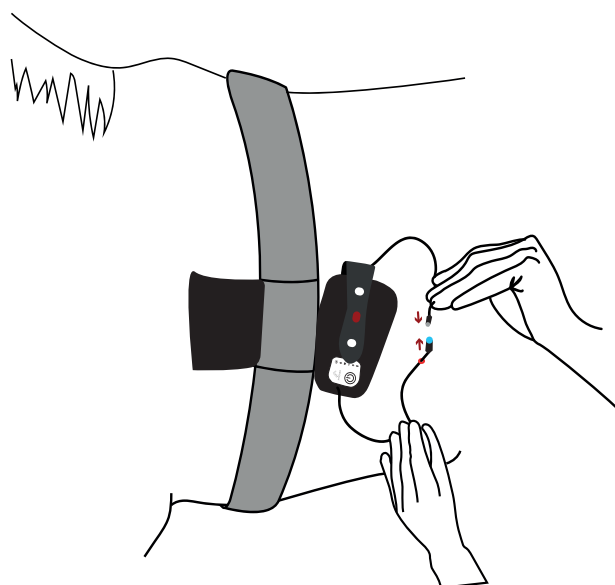


Connectez les deux câbles en alignant les 3 picots, et vissez dans les sens opposés.

7 INSTALLEZ LE HARNAIS

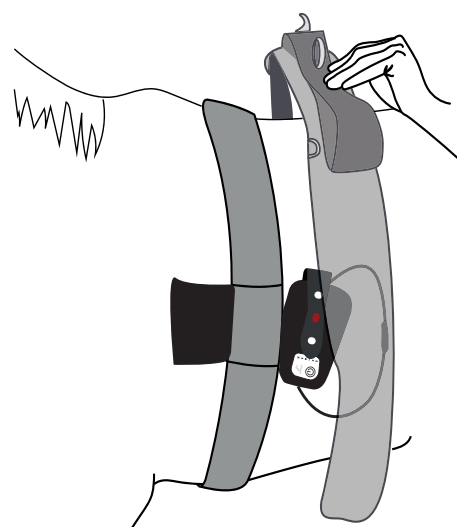


Installez le harnais sur votre cheval comme vous le faites habituellement.

8 ATTACHEZ LES SCRATCHS AUTOUR DU HARNAIS

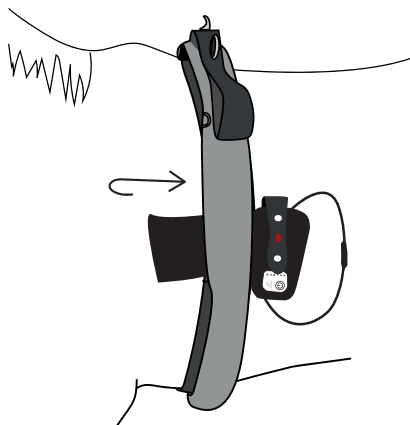

Ouvrez la poche, glissez le harnais à l'intérieur, puis attachez les scratchs pour fixer la sangle autour du harnais.

9 INSTALLEZ VOTRE SULKY

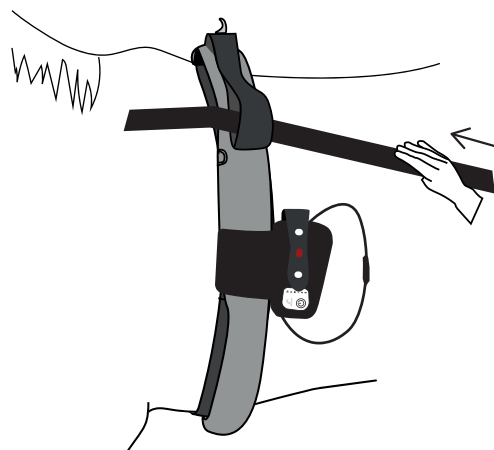

Vous pouvez alors installer votre sulky comme vous le faites habituellement.

10 VÉRIFIEZ QUE LE CARDIO FONCTIONNE CORRECTEMENT



La première LED blanche doit être allumée et fixe.




La deuxième LED verte indique le GPS, elle clignote jusqu'à avoir trouvé le signal.

NB: elle peut clignoter lorsque vous êtes dans un endroit couvert, elle se stabilisera lorsque vous serez en extérieur.



La troisième LED rouge symbolise la fréquence cardiaque. Une fois le capteur correctement installé, cette dernière clignote au rythme du coeur de votre cheval.

11 VOUS ÊTES PRÊTS À PARTIR SI

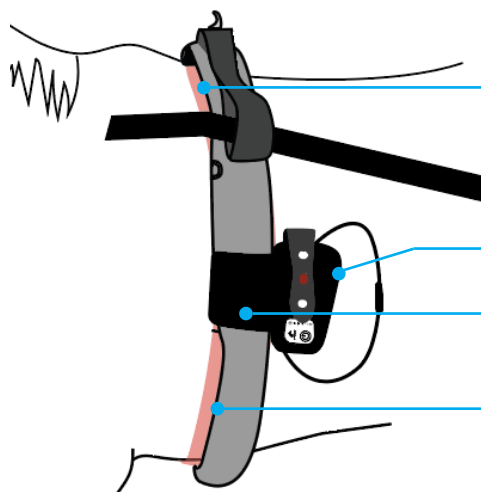

La sangle est installée sous le harnais, contre la peau du cheval.

Le capteur est dans la poche de la sangle et les câbles sont connectés.


Les scratchs sont attachés autour du harnais.

La sangle est ajustée pour assurer une bonne conductivité du signal cardiaque.

Comment enlever votre EQUIMETRE ?


À la fin de votre entraînement, il est important d'enlever votre EQUIMETRE en suivant les indications expliquées ci-dessous.

1 ÉTEIGNEZ LE CAPTEUR

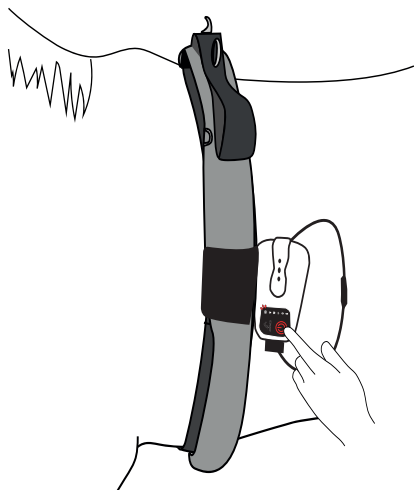


Éteignez le capteur EQUIMETRE en appuyant 3 secondes sur le bouton. Toutes les LEDs s'éteignent.

2 ENLEVEZ LE HARNAIS

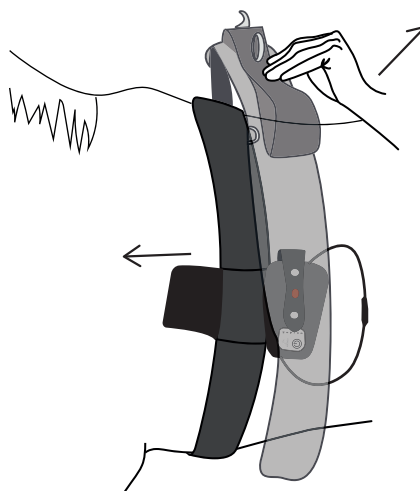


Ouvrez les scratchs et retirez le harnais.

3 RETIREZ LA SANGLE

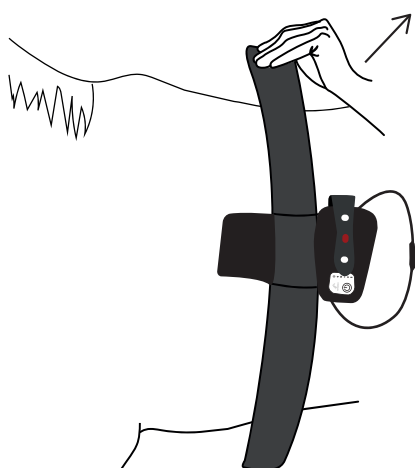


Enlevez la sangle de votre cheval, mais vous pouvez laisser EQUIMETRE dans la poche.

4 ÉTENDEZ LA SANGLE AVANT LA PROCHAINE UTILISATION

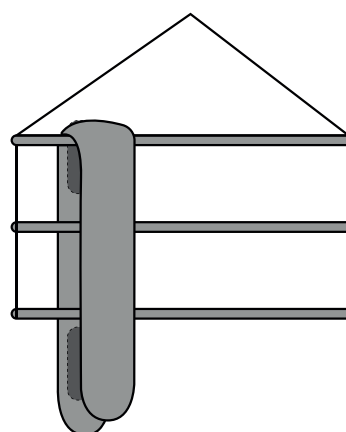

Attention : Étendez votre sangle afin d'éviter que les câbles à l'intérieur ne s'abîment, et pour qu'elle puisse sécher correctement.

5 RECHARGEZ LE CAPTEUR EQUIMETRE

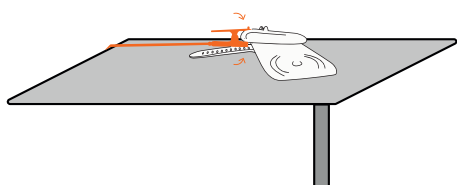


Attention : Hors utilisation, veillez à toujours brancher EQUIMETRE à la pince d'alimentation et vérifiez que le capteur est bien éteint. La LED orange de chargement est allumée.

Comment synchroniser vos données ?

À la fin de votre entraînement, récupérez les données du capteur grâce à votre téléphone.


1 CONNECTEZ-VOUS À L'APPLICATION EQUIMETRE

! ÉTEINT & À PROXIMITÉ

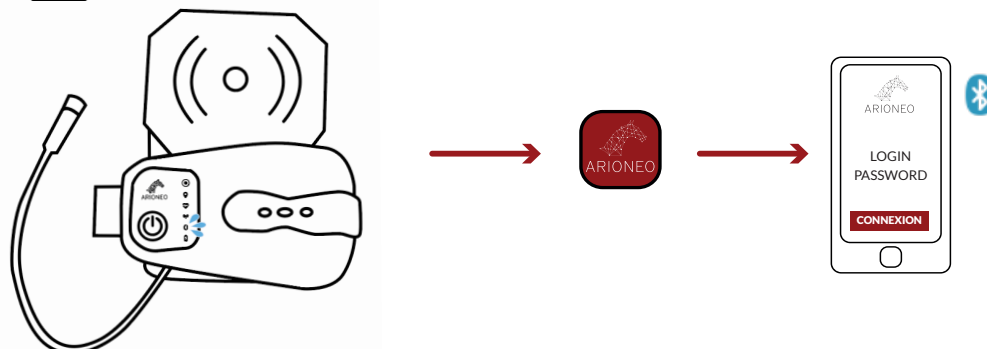

2 CLIQUEZ SUR LE BOUTON «SYNCHRONISER»


! ÉTEINT & À PROXIMITÉ

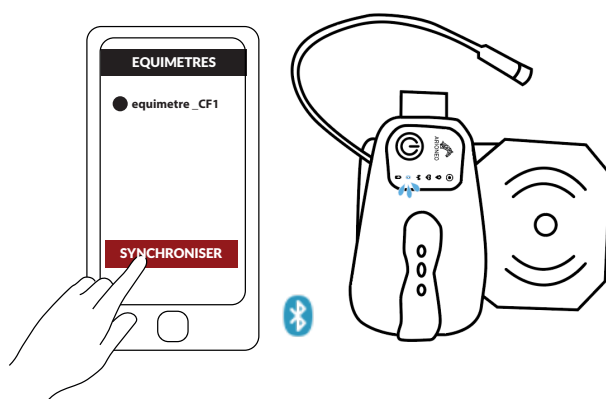

La jauge de téléchargement avance jusqu'à 100%.

Votre téléphone doit être proche du capteur. La LED bleue du bluetooth doit se mettre à clignoter.

3 DANS L'ONGLET «ENTRAÎNEMENTS» VOUS RETROUVEZ LA LISTE DES ENTRAÎNEMENTS TÉLÉCHARGÉS

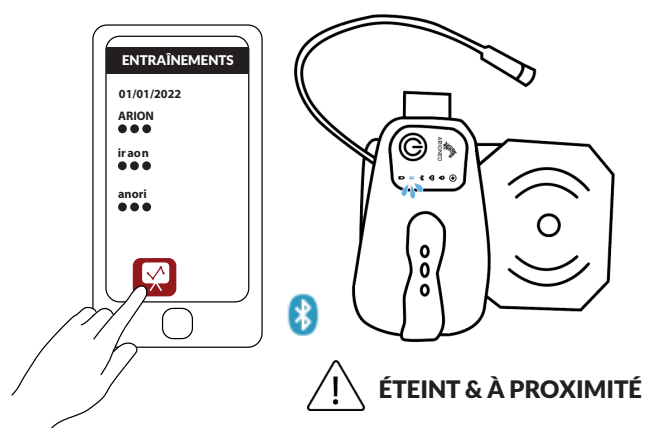

Les entraînements s'envoient automatiquement sur les serveurs afin que vous puissiez les retrouver depuis n'importe quel appareil sur la plateforme web Equimetre.com.

Cliquez sur l'entraînement pour le consulter directement depuis l'application.

